LABQUALITY

2026-11-30

INSTRUKCE

Externí hodnocení kvality

Hemoglobin A1c, čerstvé tekuté vzorky

Cyklus 6, 2026

Produkt č. 1260,1262
LQ729426061-062/FI

Dotazy
EHK Koordinátor
Päivi Ranta
paivi.ranta@labquality.com

Zásilku zkontrolujte ihned při jejím přijetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, informujte nás o tom emailem.

Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS, který vytvořila Mária Otiepková. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání.
Za správnost překladu odpovídá autorka maria.otiepkova@manacon.cz

---

Lhůta pro zaslání výsledků 14.12.2026

Vzorky

V zásilce naleznete 2 čerstvé vzorky lidské krve S001 a S002, každý o objemu 0,5 ml. Vzorky jsou připraveny k přímému použití.

S001



S002



Upozornění


Kontrolní vzorky kvality pocházející z lidské krve musí být zpracovávány se stejnou opatrností jako vzorky pacientů, tj. jako potenciální zdroje závažných infekčních onemocnění. Dárci vzorků byli předem testováni na HBsAg, HCVAb a HIVAgAb s negativním výsledkem, avšak riziko infekce nelze zcela vyloučit. Žádná známá testovací metoda nemůže zaručit úplnou jistotu, že vzorky nepřenášejí tato nebo jiná infekční onemocnění.

Vyšetření

HbA1c

Skladování a použití

Vzorky jsou připraveny k použití. **Analyzujte je ihned po doručení**. Pokud to není možné, uchovávejte je v chladničce (+2 až +8 °C). Nezmrazujte.

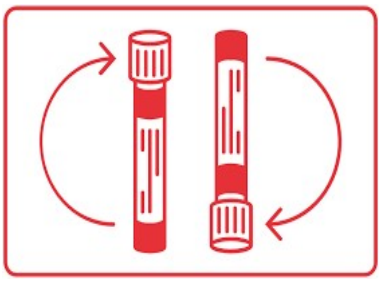

Před analýzou nechte zkumavky stát při pokojové teplotě přibližně 30 minut. Vzorek promíchejte převracením zkumavky 8–10krát, **dokud nebude suspenze homogenní**. Poté ukazováčkem poklepejte na víčko nádoby, aby tekutina zachycená na uzávěru stekla na dno. **Nemíchejte příliš intenzivně**. Nepoužívejte mechanické míchačky krve. Vzorky jsou použitelné do data ukončení cyklu. Otevřete nádobku a dále postupujte podle pracovního návodu výrobce vašeho přístroje.
Kontrolní vzorky po analýze nevyhazujte, ponechte je v lednici až do ukončení kontrolního cyklu!

Pokud objem 0,5 ml není pro váš přístroj dostatečný, objednejte si další sadu vzorků nebo vzorek přeneste do vhodné nádobky, ze které jej přístroj může odebrat.

Video návody k obsluze najdete zde - **https://www.manacon.cz/poct-v-ordinacich/ehk-testy/#hba1c**

Alternativní způsob nasávání krve kapilárou
Kápněte malou kapku promíchané krve na sklíčko (pokud nemáte, pak na blistr). Použijte k tomu plastovou pipetku, nebo čisté a suché kapátko, nebo injekční stříkačku co nejmenšího objemu. Nenasávejte veškerou krev z lahvičky! Stačí kapka 50–100 µl krve. Stejným způsobem jako z bříška prstu nasajte předepsaný objem krve integrovanou kapilárou ze sklíčka. Obrázkový návod nalezněte zde https://www.manacon.cz/wp-content/uploads/Alternativni-postup-sani-krve-odberovou-kapilarou.pdf

Výsledkový protokol přijímáme výhradně online. Klikněte na odkaz **https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/** a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci.