Měření vzorku EHK INR na přístroji Siemens Xprecia

Cyklus 2, 2026 · vzorek S001 (LQ708326021)

Důležité: Vzorek EHK se na přístroji Xprecia měří jako **kontrolní vzorek**, ne jako vzorek pacienta. Kód z instrukcí načtěte **až po zvolení měření kontroly** a z instrukcí načtěte **pouze čtvercový kód**, potom čárový kód z obalu testovacího proužku.

1 Reset přístroje

Pokud jste již měření zahájili jako test pacienta nebo jste načetli jiný kód, test zrušte, vyjměte proužek a přístroj **vypněte a znovu zapněte**. Poté začněte od kroku 2.

2 Zvolte měření kontrolního vzorku

Vzorek nechte vytemperovat na pokojovou teplotu. V hlavní nabídce zvolte **měření kontroly (QC)**, nikoliv test pacienta.


3 Načtěte kódy – nejprve kód kontroly, potom kód proužku

a) Nejprve naskenujte **čtvercový kód** z instrukcí k tomuto cyklu (kód kontroly).
b) Potom naskenujte **čárový kód z obalu testovacího proužku**.
Čárový kód LQ708326021 z instrukcí **nenačítejte** – slouží pouze k identifikaci vzorku. Dále postupujte podle pokynů na displeji (vložení proužku).

✓ a) TENTO KÓD NAČTĚTE

4 Promíchání a otevření lahvičky


Vzorek promíchejte otáčením lahvičky tam a zpět 10×. Otočením víčka lahvičku otevřete.

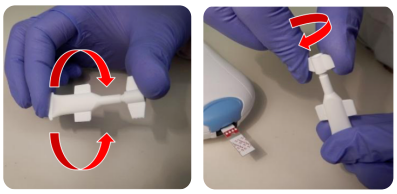

5 Nanesení vzorku

Na displeji se zobrazí výzva k nanesení kontrolního vzorku (*Apply Sample (LQC)*). Stlačením kapátka naneste kapku **shora na oblast půlkruhu** na proužku. **Nepřikládejte kapátko ze strany čipu.**



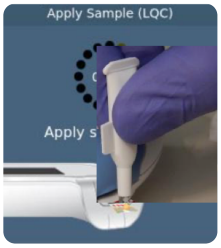

6 Uzavření a uchování

Lahvičku uzavřete zatlačením víčka zpět na hrdlo. Uzavřenou lahvičku uchovávejte při +2 až +8 °C, lze ji použít znovu do 48 hodin.



Přístroj hlásí expiraci? Nejčastěji byl načten nesprávný kód (čárový kód LQ708326021 nebo kód z instrukcí k jinému cyklu), kódy byly načteny v opačném pořadí, nebo bylo zvoleno měření pacienta. Test ukončete, přístroj vypněte a znovu zapněte a postupujte znovu od kroku 2. Zkontrolujte také správné datum na přístroji a datum exspirace testovacích proužků.

✗ TENTO KÓD NENAČÍTEJTE